

PRIMUS CARE Multifunktionsrollstuhl | HMV-Nr. 18.50.02.7055



Dieser solide Multifunktionsrollstuhl findet vor allem in der Pflege seinen vielfältigen Anwendungsbereich. Durch zahlreiche Einstellmöglichkeiten ist er individuell einsetzbar. Er bietet wegen seiner Vielseitigkeit und einfachen Bedienbarkeit zugleich optimalen Komfort für Patienten als auch für die Begleitperson.

Die bewährte Konstruktion mit den aktuellen Sitzbreitenvarianten, der einstellbaren Sitztiefe und den variablen Sitzhöhen ist damit universal einsetzbar und in den meisten Fällen vollkommen ausreichend. Sitzkantelung und Rückenverstellbarkeit können leicht eingestellt werden und bieten somit gute Voraussetzungen für eine angepasste und bequeme Positionierung der Patienten. In die komfortablen Seitenteile mit ihren verstellbaren Armlehnen lässt sich ohne weiteres ein Therapietisch einschieben. Trommelbremsen für die Begleitperson, Feststellbremsen, pannensichere Lenk- und Antriebsräder gehören zur Grundausstattung.

Die dem Körper angepasste Rückenschale mit dem jeweils passenden Sitzkissen, die weit nach hinten verstellbare Rückenlehne, sowie die abnehmbaren und hochschwenkbaren Beinstützen mit Knie- und Wadenpolstern gewährleisten Komfort und Funktionalität.

Die maximale Belastbarkeit des Primus Care beträgt 125 kg bei einem Leergewicht von ca. 33kg, jedoch ohne Beinstützen und Antriebsräder. Lieferbar ist der Stuhl in der Ausführung „Standard“ bzw. „Comfort“. Zusätzlich halten wir ein umfangreiches Zubehörprogramm vor, mit dem fast alle notwendigen Anwendungsmöglichkeiten ausführbar sind.


An dieser Stelle weisen wir auf die Schiebe-/Bremshilfe Mobilo EL II (HMV-NR. 18.99.04.1018) hin, die auch für den Primus Care von uns empfohlen wird. Wir zeigen Ihnen gerne, welche Vorteile der Mobilo EL II für Sie hat und wie einfach die Adaption/Verbindung der beiden Produkte zum Set funktioniert.

Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Fragen Sie uns! Wir helfen.

Stand 07/2016

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

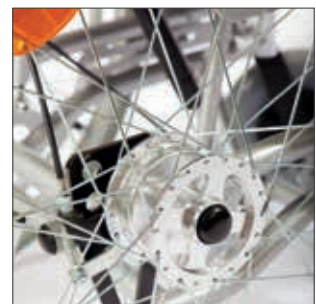

Technische Daten HMV-Nr. 18.50.02.7055

Abmessungen und Gewichte

Sitzbreite	37 - 42 cm; 41 - 46 cm; 48 - 53 cm
Sitztiefe	41 - 50 cm
Sitzhöhe	55/57,5 cm
Sitzwinkel	>32°
Gesamtbreite	65 - 75 cm
Gesamtlänge	110 cm (Sitzposition)
Gesamthöhe	100 - 125 cm (mit Schiebegriffen)
Rückenlehnenhöhe	50 cm
Leergewicht	ca. 33 kg bei SB 48-53 (in Standardausführung, jedoch ohne Antriebsräder und Beinstützen)
Maximale Belastbarkeit	125 kg

Reifen

Antriebsräder	24" x 1 3/8" PU (pannensicher)
Lenkräder	200 x 50 mm PU (pannensicher); 2-fach höhenverstellbar

Fahreigenschaften

Kippstabilität	10°
Wenderadius	85 cm
Max. Hindernishöhe	4 cm

Grundausrüstung

- Schiebebügel höhenverstellbar
- Kopfstütze mit verstellbaren Seitenpelotten
- Rückenlehne stufenlos winkel- und höhenverstellbar
- Sitzhöhe einstellbar
- Sitzkantelung stufenlos einstellbar
- Antriebsräder mit Steckachsen
- Armlehnen gepolstert höhen- und längenverstellbar
- Gebrauchsanleitung
- Seitenteile gepolstert und abnehmbar
- Beinstützen, abnehmbar mit Längenausgleich und winkelverstellbar bis 90°
- Fußplatten mit Fersenbändern, winkelverstellbar, hochklappbar
- Anti-Kipprollen mit beidseitigen Ankipphilfen
- Passive Beleuchtung
- Trommelbremse für Begleitperson
- Rahmenfarbe Silber

Zubehör

- Abduktionskeil
- Seitenpelotten mit Halterung (Paar)
- Therapietisch mit Montagesatz
- Speichenschutz transparent
- Beckengurt Care
- Antikippstützen Care
- Stockhalter
- Armpolster PU hart

