

PRIMUS MS XXL Schwerlastfaltrollstuhl



Abb. mit 200 x 50 mm Lenkräder

Jeder Mensch ist individuell. Auch in seinen Größen und Gewichten. Menschen mit hohem Übergewicht oder Adipositas Patienten benötigen als Unterstützung im Alltag besonders stabile Hilfsmittel. Wie im sogenannten Normalbereich auch, gibt es bei den XL und XXL Produkten bestimmte Kriterien, die eine größere Bandbreite abdecken können. Nicht jeder Schwerlastrollstuhl muss eine Maßanfertigung sein. Es gibt Produkte, die wie bei der Bekleidung auch auf die gängigen Körpermaße und Gewichte ausgelegt sind und dann passen wie angegossen.

Deshalb haben wir den Schwerlastfaltrollstuhl Primus MS XXL mit den Sitzbreiten von SB 66, 71 und 76 cm in unser Reha Standard Sortiment aufgenommen.

Der Schwerlastfaltrollstuhl Primus MS XXL ist aus besonders gehärtetem Stahl hergestellt und aus Sicherheitsgründen immer mit hochwirksamen Scheibenbremsen ausgestattet. Auch die 24" Antriebsräder, sowie die Vorderradgabeln der Lenkräder sind verstärkt und für die angegebenen Gewichtsbelastungen ausgelegt. Verchromte Greifreifen und Beinstützen verleihen diesem Rollstuhl eine edle Optik. Abnehmbare Armlehnen sowie abnehmbare, schwenkbare und winkelverstellbare Beinstützen gehören zur Basisausstattung.

Die mit Fersenbändern versehenen Aluminium Fußplatten erlauben ein bequemes Ein- und Aussteigen. Die Rückenlehne und die Sitzfläche sind gepolstert und bestehen aus pflegeleichtem Nylonmaterial.

Ihr Sanitätshaus verfügt über ein umfangreiches Zubehör und Ersatzteilprogramm.

Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Fragen Sie uns! Wir helfen.

Stand 07/2016

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Technische Daten


Abmessungen und Gewichte

Sitzbreite	66 / 71 / 76 cm
Sitztiefe	52,5 cm
Sitzhöhe	48 / 51 cm
Gesamtbreite	87 / 92 / 98 cm
Gesamtlänge	124 cm (mit Beinstützen)
Gesamthöhe	94,5 cm
Rückenlehnenhöhe	46 cm
Leergewicht	48,2 / 48,9 / 49,6 kg
Maximale Belastbarkeit	350 kg
Faltmaß	124 x 94,5 x 36 cm



Reifen

Antriebsräder	24" x 1" PU (pannensicher)
Lenkräder	200 x 50 mm (pannensicher)

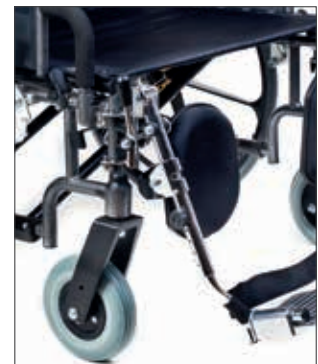

Grundausrüstung

- Schiebegriffe Gummi, schwarz
- Seitenteile, abnehmbar
- Beinstütze abnehmbar und schwenkbar
- Beinstütze waagrecht winkelverstellbar
- Fußplatte mit Fersenhalterungen
- Gebrauchsanweisung
- Scheibenbremse für Begleitperson
- Doppelkreuzstrebe
- Passive Beleuchtung
- Beidseitige Ankipphilfen
- Feststellbremse mit Quetschschutz

Zubehör

- Sicherheitsgurt
- Stockhalter
- Anti-Kipprollen
- Kniehebelbremsgriffverlängerung

