


ROLLATOR SPRING mit Zubehöropaket VARIO

Der Flexible | HMV-Nr. 10.50.04.1198

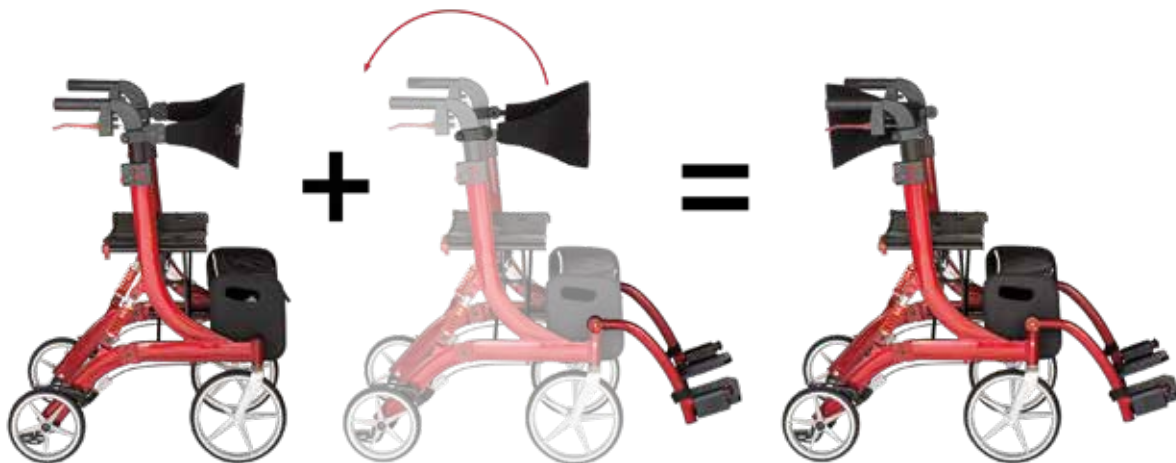

Das Zubehöropaket VARIO, mit umklappbarem Rückengurt und den hochschwenkbaren Beinstützen, erweitert die Gebrauchsmöglichkeiten des Leichtgewichtrollator SPRING um die Fähigkeit als Transportstuhl.

Insbesondere Menschen, denen längeres Gehen trotz Gehhilfe schwer fällt, die aber noch keinen Rollstuhl benötigen, werden gerne die angebotene Ruheposition mit der bequemen Lagerungsmöglichkeit für Füße und Beine in Anspruch nehmen. Wie bei Rollstühlen auch, kann dann eine Begleitperson für die Weiterfahrt sorgen.

Die vormontierten Beinstützen verbleiben, falls sie nicht gebraucht werden, in hochgeklapptem Zustand am Rollator. Die Wendigkeit des Rollator SPRING bleibt hierdurch in vollem Maße erhalten. Durch den für die Beinstützen verwendeten Werkstoff Aluminium bleibt ein günstiges Gewicht erhalten.

Der Rollator SPRING mit dem Zubehöropaket VARIO präsentiert einen gelungenen Mix aus hoher Funktionalität, Stabilität und Komfort.

Stand 09/2018

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Netztasche



Fußstütze



Fußstütze entsprechend Rahmenfarbe

Mobil, wie ich es will.

Technische Daten HMV-Nr. 10.50.04.1198

Abmessungen und Gewichte	Small	Medium	Large
Sitzbreite	46 cm		
Sitzhöhe	52 cm	56 cm	60 cm
Gesamthöhe mit Schiebegriffen	80–90 cm	90–102 cm	93–104 cm
Anzahl Verstellmöglichkeiten	5-fach		
Gesamtbreite	60 cm		
Gesamtlänge	70,5 cm		
Faltmaß	72 x 27 x 80 cm	72 x 27 x 90 cm	72 x 27 x 93 cm
Leergewicht (ohne Zubehör)	9,6 kg	9,9 kg	10,9 kg
Maximale Belastung	136 kg		
Maximale Belastung Netztasche	5 kg		



VARIO mit hochgeklappten Beinstützen

Räder	
Vorne	9,5" (pannensicher) entspricht 245 x 32 mm
Hinten	8" (pannensicher) entspricht 200 x 32 mm

Grundausrüstung

- Federung
- Schiebegriffe 5-fach höhenverstellbar
- Sitz- und Rückengurt (gepolstert)
- Netztasche
- Stockhalter
- Feststellbremse
- Fußstützen in Rahmenfarbe
- schwenkbarer Rückengurt VARIO
- Beidseitige Ankipphilfen
- Gebrauchsanweisung

Zubehör

- Sonnen- und Regenschirm, inkl. Halterung
- Getränkhalter
- Tablett
- Namensschild aus Leder und Kunstleder
- Schloss inkl. Halterung (Kabellänge: 90 cm)

Farben

- Graphitgrau metallic
- Bordeauxrot metallic



Faltmaß mit Fußstützen